

Икрожные имплантаты

Средний профиль

Анатомический профиль

POLYTECH

Health & Aesthetics



Наполненные силиконовым гелем икрожные имплантаты имеют два профиля и девять размеров.

Икроножные имплантаты, CE 0483

Описание продукции

Икроножные имплантаты производятся среднего и анатомического профилей, используются для увеличения голени и реконструкции после потери мягких тканей.

Три размера анатомического профиля и шесть размеров среднего профиля икроножных имплантатов позволяют идеально корректировать латеральную и медиальную области musculus gastrocnemius как у мужчин, так и у женщин.

Информация о материалах

Гладкая оболочка икроножных имплантатов состоит из упругого, высокоэластичного силиконового эластомера и содержит барьерный слой. Она заполнена высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем. Более плотная консистенция силиконового геля удовлетворяет все требования к большим нагрузкам на икроножные имплантаты.

Карман в дистальном конце имплантата в комплексе с гладкой поверхностью облегчают введение и размещение имплантата с помощью инструмента.

Производство имплантатов базируется на системе управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485. Качество всей продукции, которая используется в производстве, соответствует требованиям к медицинским имплантируемым материалам

Показания


- Увеличение
- Коррекция контура ног, например, в случае врожденных дефектов
- Коррекция после неврологических заболеваний, например, полиомиелита
- Коррекция аплазии и гипоплазии
- Реконструкция, например, после травмы
- Замена имплантатов

Кат. No.	Объем (мл)	Размеры (см)		
		A	B	C

Средний профиль

10200-012*	12	2.1	1.6	6.2
10200-030	30	3.0	1.9	10.2
10200-070	70	3.3	2.5	15.7
10200-090	90	3.2	2.3	19.5
10200-120	120	3.4	2.5	26.6
10200-140	140	4.4	2.5	26.2


(*) изготавливается по заказу

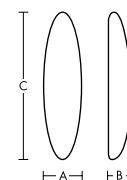

Анатомический профиль

10201-085	85	4.7	2.4	15.1
10201-140	140	5.4	2.5	19.7
10201-180	180	5.8	2.6	23.1

Размеры приблизительные

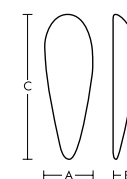

Важная информация

Икроножные имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными.

Внимание: Пожалуйста, обратите внимание на детальную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
www.polytech-health-aesthetics.com • 📧 info@polytechhealth.com

Дистрибьютор:

ООО Политех Хелс Украина
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
☎ +38 044 256 2538 • 📠 +38 044 256 2537
📧 office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechhealth.com.ua

