

## Тестикулярные имплантаты

Наполненные силиконовым гелем или  
из высокополимеризованного силикона

# POLYTECH

Health & Aesthetics



Тестикулярные имплантаты  
заполненные силиконовым гелем или  
из высокополимеризованного силикона  
имеют 5 размеров.

# Тестикулярные имплантаты, C€ 0483

## Описание продукции

Тестикулярные имплантаты с гладкой поверхностью выпускаются двух видов, оба из которых можно фиксировать к тканям.

Заполненные силиконовым гелем имплантаты имеют короткий тефлоновый проводник для иглы, который предотвращает прокол имплантата. После фиксации проводник необходимо удалить.

Тестикулярные имплантаты из высокополимеризованного силикона имеют уплотненную крышечку, прошивая которую можно фиксировать имплантат.

Каждый вид имплантатов имеет пять различных размеров.

## Информация о материалах

Оболочка, которая содержит барьерный слой, заполнена высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем, или содержит высокополимеризованный силикон. Оба вида имплантатов имеют гладкую поверхность.

Производство имплантатов базируется на системе управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485. Качество всей продукции, которая используется в производстве, соответствует требованиям к медицинским имплантируемым материалам.

## Показания

- Реконструкция после орхидэктомии
- Реконструкция после травмы
- Коррекция асимметрии
- Коррекция врожденных дефектов
- Замена имплантата

## Важная информация

Тестикулярные имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТЕФЛОНОВЫЙ ПРОВОДНИК ДЛЯ ИГЛЫ У ЗАПОЛНЕННЫХ СИЛИКОНОВЫМ ГЕЛЕМ ИМПЛАНТАТОВ ПЕРЕД УШИВАНИЕМ РАНЫ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ!**


**Внимание:** Пожалуйста, обратите внимание на подробную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Кат. No.	Вес (г)	Размеры (см)	
		A	B

### Тестикулярные имплантаты с проводником для иглы

наполненные силиконовым гелем, гладкие


10100-005	5	2.0	2.2
10100-012	12	2.6	3.3
10100-021	21	3.2	4.2
10100-027	27	3.3	4.8
10100-036	36	3.9	5.0

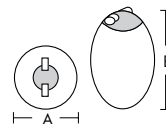

### Тестикулярные имплантаты с усиленной крышечкой

наполненные высокополимеризованным силиконом, гладкие

10101-005	5	2.0	2.2
10101-012	12	2.6	3.3
10101-021	21	3.2	4.2
10101-027	27	3.3	4.8
10101-036	36	3.9	5.0

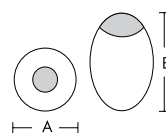

Размеры приблизительные

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH  
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany  
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30  
www.polytech-health-aesthetics.com • ✉ info@polytechhealth.com



Дистрибьютор:

ООО Политех Хелс Украина  
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина  
+38 044 256 2538 • +38 044 256 2537  
office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechhealth.com.ua