


Même® *Sublime Line* Microthane®

Имплантаты молочной железы, наполненные силиконовым гелем, круглой формы, с поверхностью Microthane®, производятся в четырех проекциях, максимум объема

POLYTECH

Health & Aesthetics

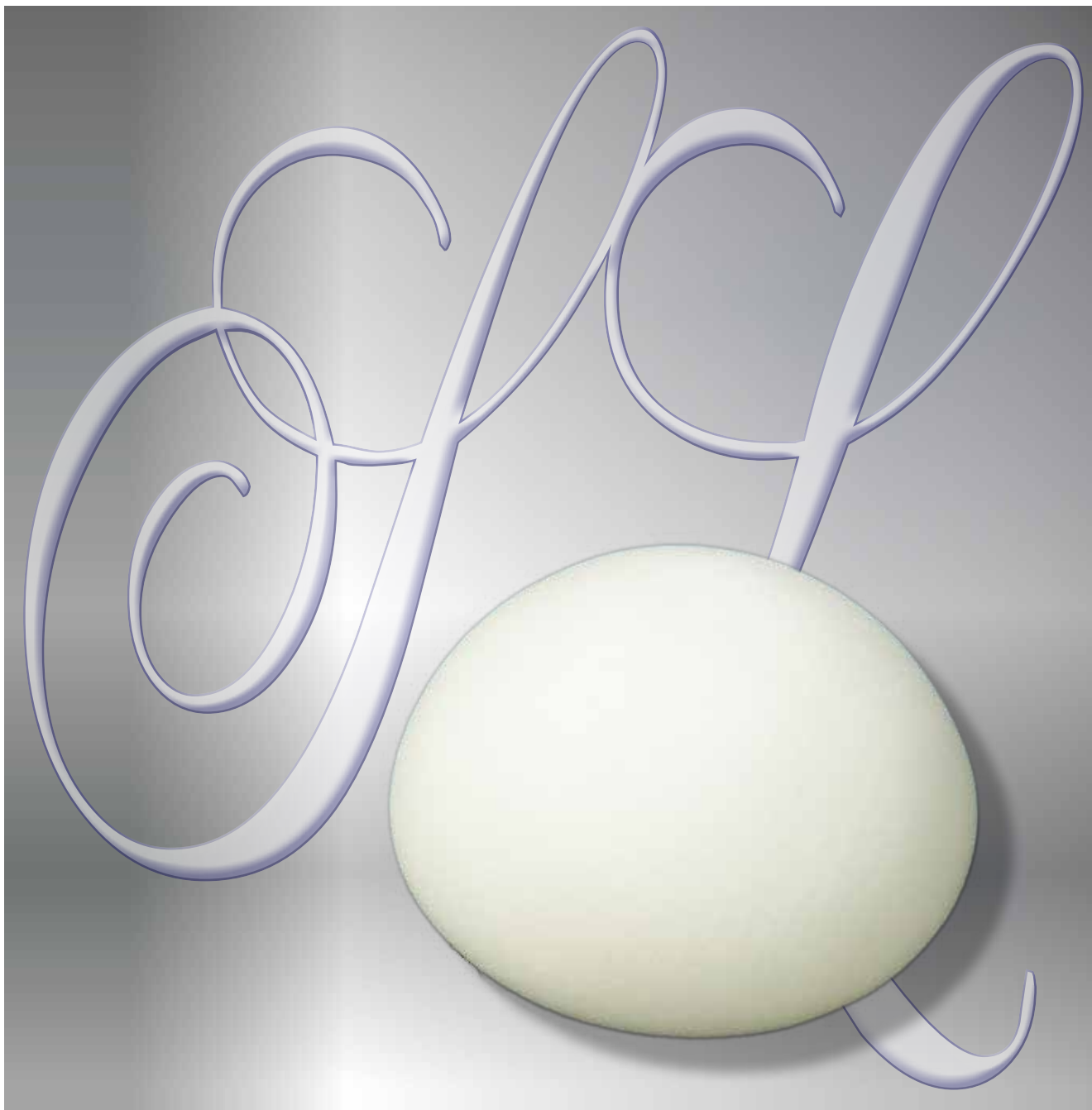

Заполненные силиконовым гелем имплантаты Même® имеют поверхность Microthane®, круглое основание и центральную проекцию. Степень заполнения имплантатов *Sublime Line*® увеличена для достижения оптимального объема.

Консистенция этих высококачественных имплантатов очень близка к естественным тканям молочной железы.

Имплантаты производятся в четырех проекциях: низкий профиль (MLS), средний профиль (MMS), высокий профиль (MHS) и экстра высокий профиль (MXS).

Дополнительный размер D является вспомогательным критерием для правильного размещения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

**Имплантаты, созданные POLYTECH –
качество, созданное в Германии**

Même® MLS – Низкий профиль, Microthane®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30724-110*	93	93	28	57	110
30724-125	98	98	29	60	125
30724-150*	103	103	30	62	150
30724-165	108	108	31	65	165
30724-185*	113	113	31	68	185
30724-215	118	118	32	71	215
30724-235*	123	123	33	73	235
30724-270	128	128	34	76	270
30724-295*	133	133	35	79	295
30724-330	138	138	36	82	330
30724-365*	143	143	37	85	365

Même® MMS – Средний профиль, Microthane®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30725-120	88	88	34	60	120
30725-145*	93	93	35	63	145
30725-165	98	98	37	66	165
30725-195*	103	103	38	69	195
30725-220	108	108	39	72	220
30725-255*	113	113	40	75	255
30725-285	118	118	42	78	285
30725-320*	123	123	43	81	320
30725-360	128	128	45	84	360
30725-400*	133	133	46	87	400
30725-445	138	138	47	90	445

Même® MHS – Высокий профиль, Microthane®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30726-155	88	88	41	65	155
30726-180*	93	93	42	68	180
30726-210	98	98	44	71	210
30726-235*	103	103	46	75	235
30726-275	108	108	47	78	275
30726-315*	113	113	49	81	315
30726-360	118	118	51	84	360
30726-400*	123	123	53	87	400
30726-450	128	128	55	91	450
30726-505*	133	133	57	94	505
30726-560	138	138	59	97	560
30726-620*	143	143	61	100	620

Même® MXS – Экстравысокий профиль, Microthane®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30727-105*	73	73	42	59	105
30727-125	78	78	45	63	125
30727-155*	83	83	47	66	155
30727-180	88	88	49	70	180
30727-215*	93	93	51	73	215
30727-250	98	98	53	77	250
30727-285*	103	103	55	81	285
30727-330	108	108	57	84	330
30727-380*	113	113	59	88	380
30727-430	118	118	61	91	430
30727-485*	123	123	63	95	485
30727-545	128	128	65	98	545
30727-610*	133	133	67	102	610
30727-675	138	138	69	105	675

Размеры указаны приблизительно. Последующие размеры могут производиться под заказ. Гладкие, наполненные силиконовым гелем, сайзеры (нестерильные, ре-стерилизуемые) выпускаются в размерах, отмеченных знаком (*).

Информация о материалах

Имплантаты производства POLYTECH Health&Aesthetics заполнены высоко перекрестно-связанным Formory® гелем, отличаются своей естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти» гель всегда возвращается к первоначальной форме после механического сжатия.

Устойчивая к химическому и механическому воздействию, эластичная оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов содержит несколько слоев силиконового эластомера. Для достижения высокой степени безопасности, оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов оснащена дополнительным барьерным слоем.

Оболочка имплантата покрыта Microthane® (микрополиуретановой пеной). Данная поверхность известна своей надежностью и, как было доказано, обеспечивает снижение частоты развития капсулярной контрактуры¹.

1: (Handel, 1991; Gasperoni, 1992; Pennisi, 1990; Shapiro, 1989; Baudelot, 1989; Artz, 1988; Hermann, 1984; Eyssen, 1984; Schatten, 1984; Hester et al., 2001; Vázquez, 2007) (Handel, 2006)

Дистрибьютор:
ООО Политех Хелс Украина
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
+38 044 256 2538 • +38 044 256 2537
office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechhealth.com.ua

Производство имплантатов базируется на системе управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485. Качество всей продукции, которая используется в производстве, соответствует требованиям к медицинским имплантируемым материалам.

Показания

- Реконструкция груди после мастэктомии
- Увеличение и коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии или гипоплазии
- Комбинированные деформации молочной железы и грудной клетки
- Птоз или атрофия
- Замена имплантата

Важная информация

Имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными. ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, обратите внимание на детальную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
www.polytech-health-aesthetics.com • 📧 info@polytechhealth.com

