


Оптикон® микротан®

Покрытые микротаном® наполненные силиконовым гелем имплантаты молочной железы, короткая форма, четыре проекции

POLYTECH

Health & Aesthetics

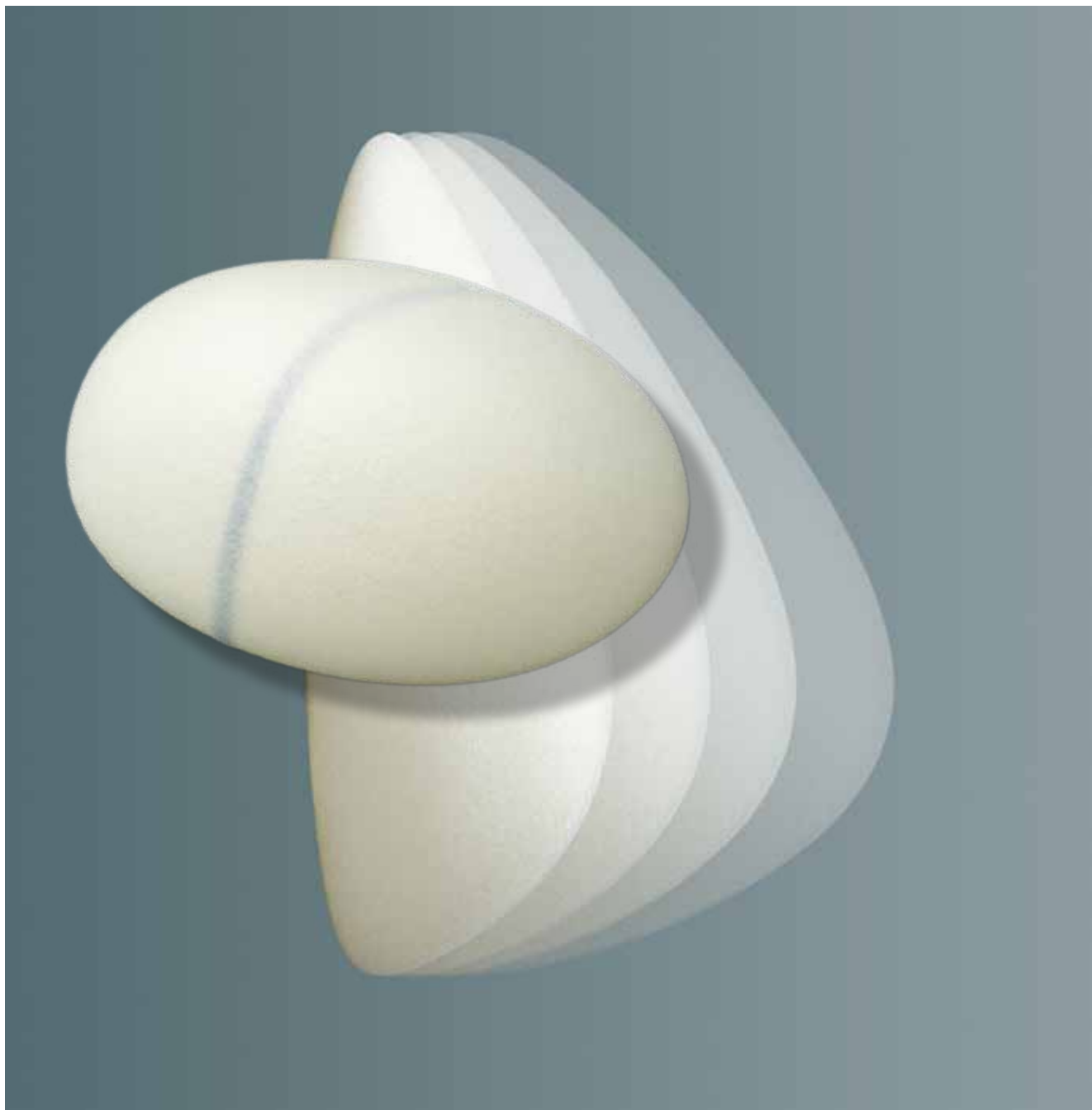

Наполненные силиконовым гелем имплантаты Оптикон®, покрытые микротаном®, имеют овальное вытянутое по горизонтали основание (короткая форма) и наивысшую точку проекции в нижней части овального основания.

Консистенция этих высококачественных имплантатов молочной железы максимально приближена по тактильным ощущениям и свойствам при движениях к молочной железе. Существует четыре проекции

имплантатов: низкий профиль (MLP), средний профиль (MMP), высокий профиль (MHP) и экстра высокий профиль (MXP).

Новое измерение кривизны D, которое отображает расстояние от наивысшей точки проекции до нижнего края имплантата, может учитываться при определении правильного положения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

Оптикон® микротан®, CE 0483

Оптикон® MLP – низкий профиль, покрытые микротаном®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30644-100*	106	90	29	42	100
30644-110	111	94	30	44	110
30644-125*	116	98	30	48	125
30644-145	121	103	31	48	145
30644-160*	126	107	32	49	160
30644-180	131	111	33	51	180
30644-200*	136	115	34	53	200
30644-220	141	119	35	55	220
30644-245*	146	124	36	56	245
30644-270	151	128	36	58	270
30644-295*	156	132	37	60	295
30644-325	161	136	38	62	325

Оптикон® MHP – высокий профиль, покрытые микротаном®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30646-105	91	77	40	49	105
30646-120*	96	82	41	51	120
30646-140	101	86	43	54	140
30646-160*	106	90	45	56	160
30646-185	111	94	46	58	185
30646-210*	116	98	48	61	210
30646-240	121	103	50	63	240
30646-270*	126	107	51	65	270
30646-305	131	111	53	68	305
30646-340*	136	115	55	70	340
30646-380	141	119	56	72	380
30646-420*	146	124	58	75	420
30646-465	151	128	60	77	465
30646-510*	156	132	61	80	510
30646-560	161	136	63	82	560

Размеры приблизительные. Имплантаты с другими размерами могут производиться под заказ. Наполненные силиконовым гелем гладкие сайзеры (нестерильные, могут повторно стерилизоваться), производятся для продукции, отмеченной знаком *.

Информация о материалах

Имплантаты производства Polytech Health & Aesthetics заполнены высоко перекрестно связанным гелем, который отличается исключительно естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти», после механического воздействия гель возвращается к изначально заданной форме.

Химически и механически резистентная эластичная оболочка имплантатов состоит из нескольких слоев силиконового эластомера. С целью обеспечения высокой степени безопасности, оболочка имплантатов содержит дополнительный барьерный слой.

Поверхность оболочки имплантатов покрыта микротаном® (микрополиуретановой пеной). Частота капсулярной контрактуры при использовании имплантатов с микрополиуретановым покрытием составляет 0-3%¹, что на 30% ниже по сравнению с гладкими имплантатами.²

1: Handel, 1991; Gasperoni, 1992; Pennisi, 1990; Shapiro, 1989; Baudelot, 1989; Artz, 1988; Hermann, 1984; Eyssen, 1984; Schatten, 1984; Hester et al., 2001; Vázquez, 2007
2: Handel, 2006

Оптикон® MMP – средний профиль, покрытые микротаном®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30645-115	101	86	36	47	115
30645-130*	106	90	37	49	130
30645-150	111	94	38	51	150
30645-170*	116	98	39	53	170
30645-190	121	103	41	65	190
30645-215*	126	107	42	57	215
30645-240	131	111	43	59	240
30645-270*	136	115	44	61	270
30645-300	141	119	46	63	300
30645-330*	146	124	47	65	330
30645-365	151	128	48	67	365
30645-405*	156	132	49	69	405
30645-445	161	136	51	71	445

Оптикон® MXP – экстремально высокий профиль, покрытые микротаном®

Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30647-105*	86	73	45	52	105
30647-120	91	77	47	55	120
30647-145*	96	82	49	58	145
30647-170	101	86	51	61	170
30647-195*	106	90	53	63	195
30647-220	111	94	55	66	220
30647-255*	116	98	57	69	255
30647-290	121	103	59	71	290
30647-325*	126	107	61	74	325
30647-365	131	111	63	77	365
30647-410*	136	115	65	79	410
30647-455	141	119	67	82	455
30647-510*	146	124	69	85	510
30647-560	151	128	71	87	560

Показания

- Реконструкция молочной железы после мастэктомии и удаления молочной железы
- Увеличение молочной железы или коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии и гипоплазии
- Коррекция комбинированных деформаций грудной клетки и молочной железы
- Птоз или атрофия молочной железы
- Замена имплантата

Важная информация

Пожалуйста, детально ознакомьтесь с инструкцией по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
www.polytech-health-aesthetics.com • 📧 info@polytechhealth.com

Дистрибьютор:

ООО Политех Силимед Украина
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
☎ +38 044 256 2538 • 📠 +38 044 256 2537
📧 office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechsilimed.com.ua

