


## Оптимам® микротан®

Покрытые микротаном® наполненные силиконовым гелем имплантаты молочной железы, анатомическая форма, четыре проекции

# POLYTECH

Health & Aesthetics

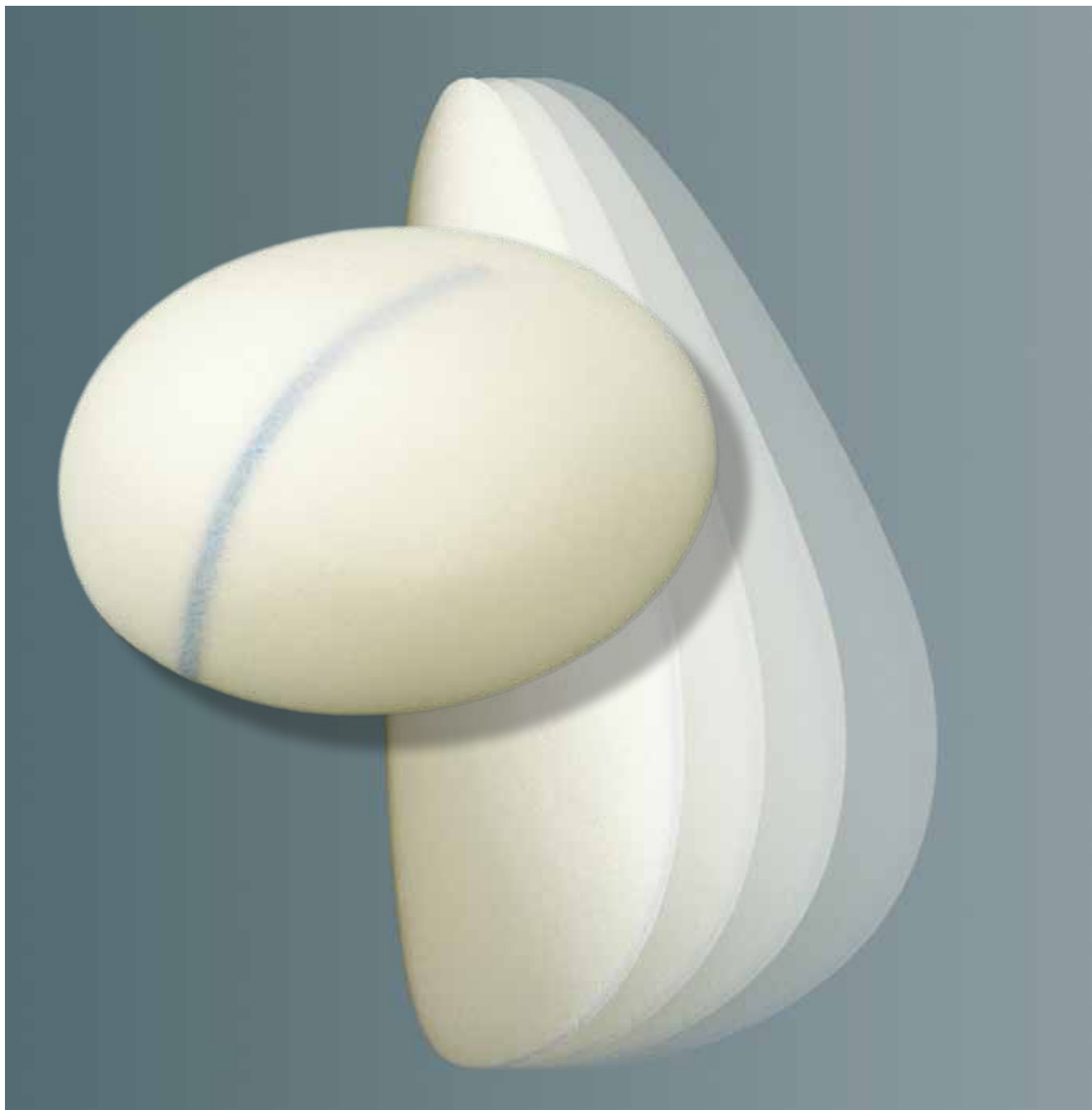

Наполненные силиконовым гелем имплантаты Оптимам®, покрытые микротаном®, имеют овальное вытянутое по вертикали основание и анатомическую проекцию с наивысшей точкой в нижней части овального основания.

Консистенция этих высококачественных имплантатов молочной железы максимально приближена по тактильным ощущениям и свойствам при движениях к молочной железе. Существует четыре проекции

имплантатов: низкий профиль (MLP), средний профиль (MMP), высокий профиль (MHP) и экстра высокий профиль (MXP).

Новое измерение кривизны D, которое отображает расстояние от наивысшей точки проекции до нижнего края имплантата, может учитываться при определении правильного положения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

# Оптимам® микротан®, CE 0483

Оптимам® MLP – низкий профиль, покрытые микротаном®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30674-100*	96	110	27	45	100
30674-120	101	116	28	47	120
30674-135*	106	122	29	49	135
30674-155	111	128	30	51	155
30674-175*	116	134	30	54	175
30674-200	121	139	31	56	200
30674-220*	126	145	32	58	220
30674-250	131	151	33	60	250
30674-275*	136	157	34	62	275
30674-305	141	163	35	64	305
30674-340*	146	168	36	66	340
30674-375	151	174	36	68	375
30674-410*	156	180	37	70	410
30674-450	161	186	38	72	450

Оптимам® MMP – средний профиль, покрытые микротаном®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30675-115	91	105	33	48	115
30675-135*	96	110	34	51	135
30675-155	101	116	36	53	155
30675-180*	106	122	37	56	180
30675-205	111	128	38	58	205
30675-235*	116	134	39	60	235
30675-265	121	139	41	63	265
30675-300*	126	145	42	65	300
30675-335	131	151	43	67	335
30675-370*	136	157	44	70	370
30675-415	141	163	46	72	415
30675-460*	146	168	47	74	460
30675-505	151	174	48	77	505
30675-555*	156	180	49	79	555
30675-610	161	186	51	82	610

Размеры приблизительные. Имплантаты с другими размерами могут производиться под заказ. Наполненные силиконовым гелем гладкие сайзеры (нестерильные, могут повторно стерилизоваться), производятся для продукции, отмеченной знаком \*.

## Информация о материалах

Имплантаты производства Polytech Health & Aesthetics заполнены высоко перекрестно связанным гелем, который отличается исключительно естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти», после механического воздействия гель возвращается к изначально заданной форме.

Химически и механически резистентная эластичная оболочка имплантатов состоит из нескольких слоев силиконового эластомера. С целью обеспечения высокой степени безопасности, оболочка имплантатов содержит дополнительный барьерный слой.

Поверхность оболочки имплантатов покрыта микротаном® (микрополиуретановой пеной). Частота капсулярной контрактуры при использовании имплантатов с микрополиуретановым покрытием составляет 0-3%<sup>1</sup>, что на 30% ниже по сравнению с гладкими имплантатами.<sup>2</sup>

1: Handel, 1991; Gasperoni, 1992; Pennisi, 1990; Shapiro, 1989; Baudelot, 1989; Artz, 1988; Hermann, 1984; Eyssen, 1984; Schatten, 1984; Hester et al., 2001; Vázquez, 2007  
2: Handel, 2006

Оптимам® MHP – высокий профиль, покрытые микротаном®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30676-140	91	105	40	54	140
30676-165*	96	110	41	57	165
30676-195	101	116	43	60	195
30676-225*	106	122	45	62	225
30676-255	111	128	46	65	255
30676-290*	116	134	48	68	290
30676-330	121	139	50	70	330
30676-375*	126	145	51	73	375
30676-420	131	151	53	76	420
30676-470*	136	157	55	78	470
30676-520	141	163	56	81	520
30676-580*	146	168	58	84	580

Оптимам® MXP – экстремально высокий профиль, покрытые микротаном®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
	A	C	B	D	
30677-100*	76	87	40	51	100
30677-120	81	93	43	54	120
30677-145*	86	99	45	57	145
30677-170	91	105	47	60	170
30677-200*	96	110	49	63	200
30677-230	101	116	51	66	230
30677-265*	106	122	53	69	265
30677-305	111	128	55	72	305
30677-350*	116	134	57	75	350
30677-400	121	139	59	78	400
30677-450*	126	145	61	81	450
30677-505	131	151	63	84	505
30677-565*	136	157	65	87	565
30677-630	141	163	67	90	630

## Показания

- Реконструкция молочной железы после мастэктомии и удаления молочной железы
- Увеличение молочной железы или коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии и гипоплазии
- Коррекция комбинированных деформаций грудной клетки и молочной железы
- Птоз или атрофия молочной железы
- Замена имплантата

## Важная информация

Пожалуйста, детально ознакомьтесь с инструкцией по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.



Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH  
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany  
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30  
www.polytech-health-aesthetics.com • ✉ info@polytechhealth.com

Дистрибьютор:

ООО Политех Силимед Украина  
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина  
☎ +38 044 256 2538 • 📠 +38 044 256 2537  
✉ office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechsilimed.com.ua