


Optimam® *Sublime Line* Microthane®

Имплантаты молочной железы, наполненные силиконовым гелем, имеют продолговатое основание, поверхность Microthane®, производятся в четырех проекциях, максимум объема

POLYTECH

Health & Aesthetics

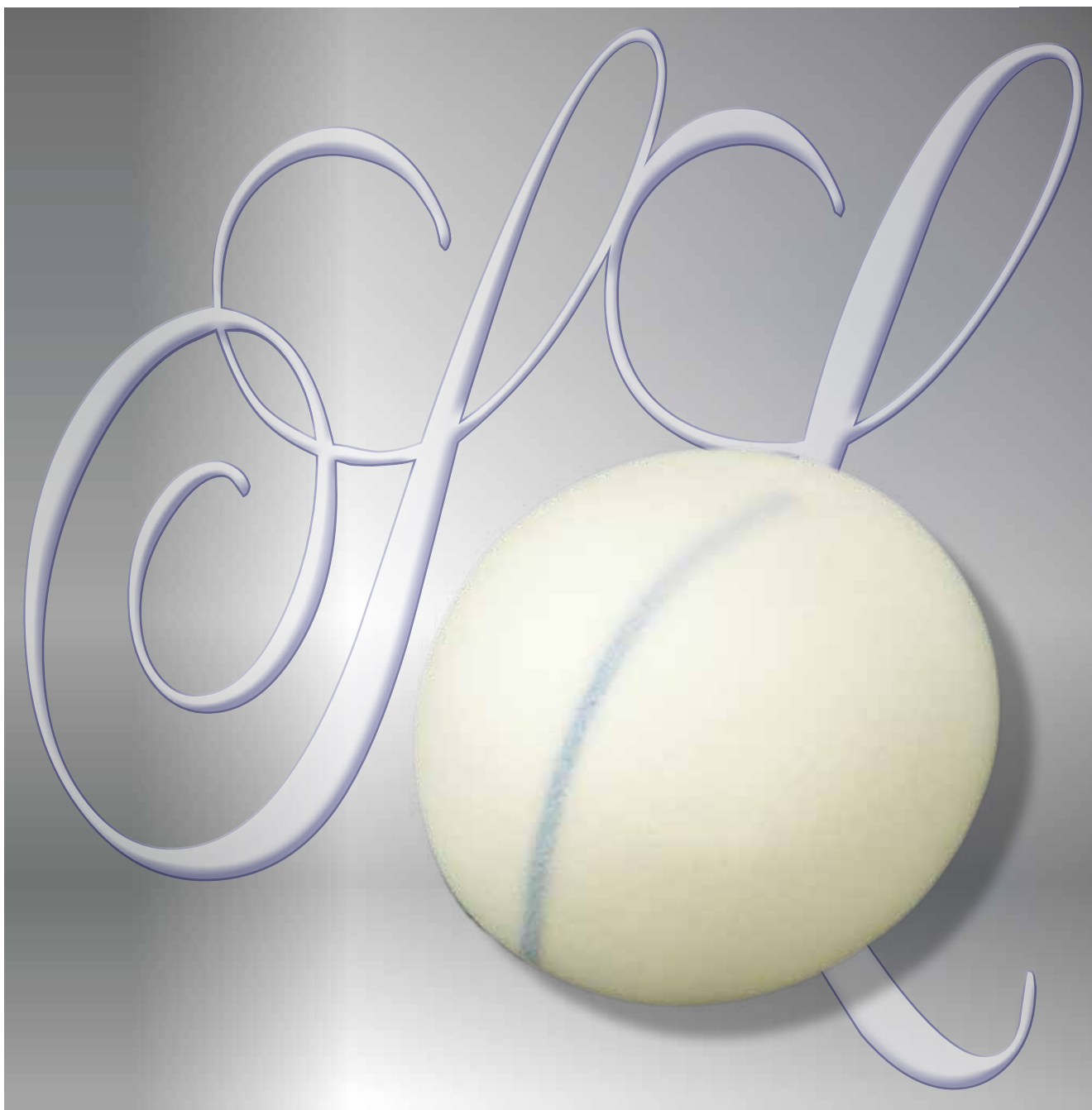





Заполненные силиконовым гелем имплантаты Optimam® имеют поверхность Microthane®, продолговатое основание, анатомическую проекцию с наивысшей точкой в нижней половине. Степень заполнения имплантатов *Sublime Line*® увеличена для достижения оптимального объема.





Консистенция этих высококачественных имплантатов очень близка к естественным тканям молочной

железы. Имплантаты производятся в четырех проекциях: низкий профиль (MLS), средний профиль (MMS), высокий профиль (MHS) и экстра высокий профиль (MXS).

Дополнительный размер D является вспомогательным критерием для правильного размещения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

**Имплантаты, созданные POLYTECH –
качество, созданное в Германии**

Optimam® MLS – Низкий профиль, Microthane®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
					
	A	C	B	D	
30774-110*	93	107	28	45	110
30774-130	98	113	29	47	130
30774-150*	103	119	30	49	150
30774-170	108	125	31	51	170
30774-195*	113	131	31	54	195
30774-220	118	136	32	56	220
30774-240*	123	142	33	58	240
30774-275	128	148	34	60	275
30774-305*	133	154	35	62	305
30774-335	138	160	36	64	335
30774-375*	143	165	37	66	375
30774-415	148	171	37	68	415
30774-450*	153	177	38	70	450
30774-495	158	183	39	72	495

Optimam® MMS – Средний профиль, Microthane®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
					
	A	C	B	D	
30775-125	88	102	34	50	125
30775-150*	93	107	35	52	150
30775-170	98	113	37	55	170
30775-200*	103	119	38	57	200
30775-225	108	125	39	60	225
30775-260*	113	131	40	62	260
30775-290	118	136	42	64	290
30775-330*	123	142	43	67	330
30775-370	128	148	45	69	370
30775-405*	133	154	46	71	405
30775-455	138	160	47	74	455
30775-505*	143	165	49	76	505
30775-555	148	171	50	78	555
30775-610*	153	177	51	81	610
30775-670	158	183	53	83	670

Информация о материалах





Имплантаты производства POLYTECH Health&Aesthetics заполнены высоко перекрестно-связанным Formory® гелем, отличаются своей естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти» гель всегда возвращается к первоначальной форме после механического сжатия.





Устойчивая к химическому и механическому воздействию, эластичная оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов содержит несколько слоев силиконового эластомера. Для достижения высокой степени безопасности, оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов оснащена дополнительным барьерным слоем.

Оболочка имплантата покрыта Microthane® (микрополиуретановой пеной). Данная поверхность известна своей надежностью и, как было доказано, обеспечивает снижение частоты развития капсулярной контрактуры¹.

1: (Handel, 1991; Gasperoni, 1992; Pennisi, 1990; Shapiro, 1989; Baudelot, 1989; Artz, 1988; Hermann, 1984; Eyssen, 1984; Schatten, 1984; Hester et al., 2001; Vázquez, 2007) (Handel, 2006)

Дистрибьютор:
ООО Политех Хелс Украина
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
+38 044 256 2538 • +38 044 256 2537
office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechhealth.com.ua

Optimam® MHS – Высокий профиль, Microthane®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
					
	A	C	B	D	
30776-155	88	102	41	56	155
30776-180*	93	107	42	58	180
30776-215	98	113	44	61	215
30776-250*	103	119	46	64	250
30776-280	108	125	47	66	280
30776-320*	113	131	49	69	320
30776-365	118	136	51	72	365
30776-415*	123	142	53	74	415
30776-460	128	148	55	77	460
30776-515*	133	154	57	80	515
30776-570	138	160	59	82	570
30776-640*	143	165	61	85	640

Optimam® MXS – Экстремально высокий профиль, Microthane®					
Кат №	Размеры (мм)				Объем (мл)
					
	A	C	B	D	
30777-110*	73	84	42	52	110
30777-130	78	90	45	55	130
30777-160*	83	96	47	58	160
30777-185	88	102	49	61	185
30777-220*	93	107	51	64	220
30777-255	98	113	53	67	255
30777-290*	103	119	55	70	290
30777-335	108	125	57	73	335
30777-385*	113	131	59	76	385
30777-440	118	136	61	79	440
30777-495*	123	142	63	82	495
30777-555	128	148	65	85	555
30777-620*	133	154	67	88	620
30777-695	138	160	69	91	695

Размеры указаны приблизительно. Последующие размеры могут производиться под заказ. Гладкие, наполненные силиконовым гелем, сайзеры (нестерильные, ре-стерилизуемые) выпускаются в размерах, отмеченных знаком (*).

Производство имплантатов базируется на системе управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485. Качество всей продукции, которая используется в производстве, соответствует требованиям к медицинским имплантируемым материалам.

Показания

- Реконструкция груди после мастэктомии
- Увеличение и коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии или гипоплазии
- Комбинированные деформации молочной железы и грудной клетки
- Птоз или атрофия
- Замена имплантата

Важная информация

Имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными. ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, обратите внимание на детальную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
www.polytech-health-aesthetics.com • ✉ info@polytechhealth.com

